


de silicona
 Protector de pezones
 Instrucciones para el 

de silicone
 t terelle de mamelon
 Mode d'emploi de la 

Silicone Nipple Shield 
 Instructions

17212

For more information about Ameda Breastfeeding products, visit www.ameda.com.

Pour plus d'information au sujet des produits d'allaitement Ameda, visitez www.ameda.com.


Para m s informaci n sobre productos Ameda Breastfeeding, visite www.ameda.com.




Distributed in USA by:
Evenflo Company, Inc.
 1801 Commerce Drive
 Piqua, Ohio 45356
1.866.99.AMEDA (263332)
www.ameda.com

Distributed in Canada by:
 Distribu  au Canada par:
Mothers Choice Products Ltd.
 2133-11871 Horseshoe Way
 Richmond, BC V7A 5H5
1.800.604.6225
www.motherschoiceproducts.com


Distributed in Australia by:
Advantage Health Care
 34 Percy Street
 Mordialloc VIC 3195
61 (3) 9580 9288
www.ameda.com.au

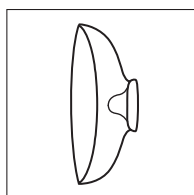

1

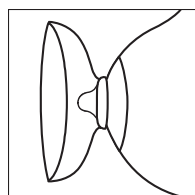

2

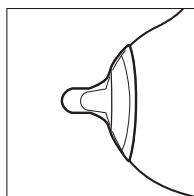

3

Ameda Silicone Nipple Shield Instructions

The Ameda Nipple Shield may be used to help babies who are having problems latching to the breast. The Nipple Shield should be large enough to fit mother's nipple. It should also fit well into baby's mouth without gagging. If it is not a good fit for mother or baby, it should not be used.

Note: A nipple shield should only be used under the guidance of a healthcare professional, so that adequate milk intake can be ensured.

Before Each Use

Wash hands well with soap and water.



Before First Use

Wash in hot, soapy water before first use. Boiling is not necessary unless otherwise instructed by a healthcare provider. Rinse well in hot, clean water. Allow to fully air dry before use.

Using Ameda Nipple Shield


1. Bend back rim of Nipple Shield and about half of tip.
2. Place tip of Nipple Shield onto nipple.
3. As Nipple Shield is unfurled onto breast, nipple may be drawn into shield tip.

When latching baby to breast, be sure baby opens wide and latches well onto brim of shield, not just tip.


After breastfeeding, milk should be seen in tip of shield.

After Each Use


- Rinse off any milk with cool water.
- Wash in hot, soapy water.
- Rinse well in hot, clean water.
- Fully air dry.

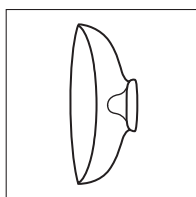

1

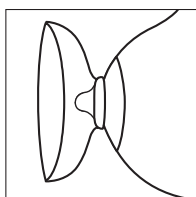

2

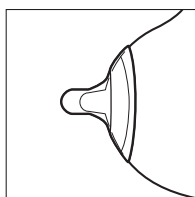

3

CA Mode d'emploi de la tétérelle de mamelon de silicone Ameda

La tétérelle Ameda peut servir pour aider les bébés qui ont des problèmes à agripper le sein. La tétérelle doit être assez large pour le sein de la mère. Elle doit aussi bien s'ajuster à la bouche du bébé sans provoquer de nausée. S'il n'y a pas de bon ajustement pour la mère ou le bébé, il ne faut pas l'utiliser.

Remarque : Une tétérelle ne doit être utilisée que sous la surveillance d'un professionnel des soins de santé pour s'assurer que le bébé ait une quantité adéquate de lait.

Avant chaque utilisation

Lavez-vous bien les mains avec de l'eau et du savon.



Avant la première utilisation

Lavez à l'eau chaude et savonneuse avant la première utilisation. Faites bouillir si nécessaire à moins d'indication contraire par un fournisseur de soins de santé. Rincez bien à l'eau propre et chaude. Laissez entièrement sécher à l'air avant de l'utiliser.

Utilisation de la tétérelle de mamelon Ameda

1. Repliez le bord de la tétérelle et environ la moitié de l'embout.
2. Placez l'embout de la tétérelle sur le mamelon.
3. Tandis que la tétérelle couvre le sein, le mamelon peut être attiré dans l'embout de la tétérelle.

En mettant le bébé au sein, assurez-vous que le bébé ouvre bien la bouche et agrippe bien le bord de la tétérelle, non pas seulement l'embout.

Après l'allaitement, vous devriez voir du lait sur l'embout de la tétérelle.

Après chaque utilisation

- Rincez tout le lait à l'eau tiède.
- Lavez dans l'eau chaude savonneuse.
- Rincez bien à l'eau propre et chaude.
- Laissez sécher à l'air.

ES Instrucciones para el protector de pezones de silicona Ameda

El protector de pezones Ameda puede usarse para ayudar a los bebés que tienen problemas para prenderse del pecho. El protector de pezones debe ser lo suficientemente grande como para adaptarse al pezón de la madre. También debe calzar bien en la boca del bebé sin provocarle arcadas. Si no tiene un buen calce para la madre o el bebé, no debe usarse.

Nota: El protector de pezones deberá usarse únicamente bajo la orientación de un profesional de la salud, para poder asegurar que el bebé tome la cantidad de leche adecuada.

Antes de cada uso

Lávese bien las manos con agua y jabón.



Antes del primer uso

Lave con agua caliente y jabón antes del primer uso. No es necesario hervir a menos que así se lo indique un profesional de la salud. Enjuague bien con agua caliente y limpia. Déjelo secar al aire completamente antes de volver a usarlo.

Uso del protector de pezones Ameda

1. Doble hacia atrás el borde del protector de pezones y aproximadamente la mitad de la punta.
2. Coloque la punta del protector de pezones en el pezón.
3. A medida que el protector de pezones se despliega en el pecho, el pezón será absorbido hacia la punta del protector.

Quando el bebé se prenda al pecho, asegúrese de que abra bien la boca y se prenda bien al reborde del protector, no solamente a la punta.

Después de amamantar, deberá ver leche en la punta del protector.

Después de cada uso

- Enjuague los restos de leche con agua fría.
- Lave con agua caliente y jabón.
- Enjuague bien con agua caliente y limpia.
- Seque al aire completamente.